



TRANSFEMORAL




Získejte správnou rovnováhu

Úplné řešení pro méně aktivní pacienty
s amputací ve stehně

www.ossur.cz



Life Without Limitations®

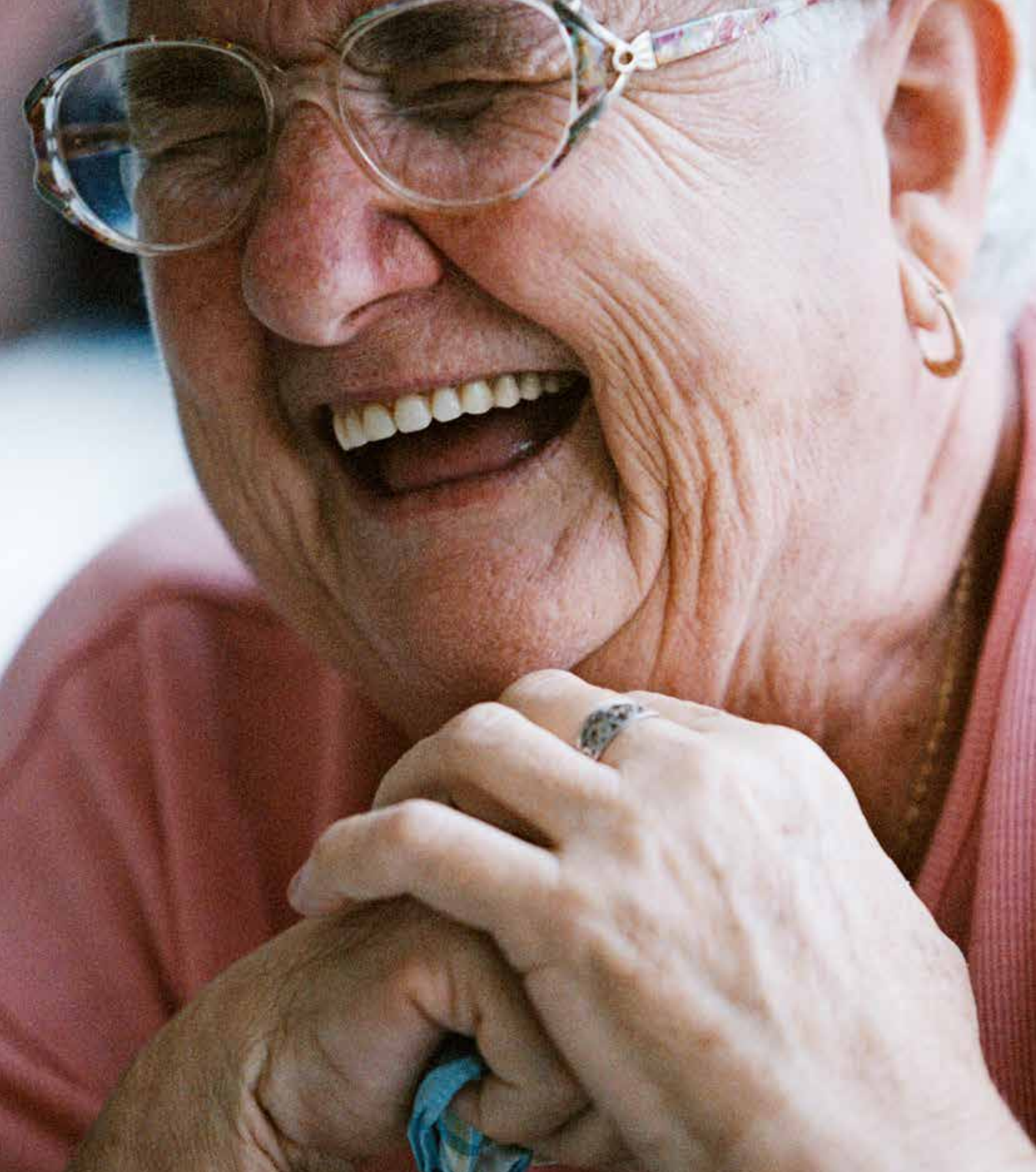

„U našich vysoce funkčních a pokročilých systémů jsme pevně přesvědčeni, že z nejnovější technologie a kvalitních výrobků může mít užitek každý. Bez ohledu na to, jaká omezení někdo má, jeho cíle a úspěchy jsou stejně důležité jako cíle a úspěchy kohokoli jiného a zaslouží si tu nejlepší podporu.“

Bezpečnost, pohodlí a mobilita

Každý zkušený protetik ví, že dosažení optimálních výsledků i u těch nejméně aktivních pacientů po amputaci vyžaduje pečlivé vyvážení individuálních potřeb a přání. Společnost Össur chápe, že tyto často nepatrné rozdíly mohou znamenat pro život lidí mnoho, a právě proto jsme rozšířili sortiment našich řešení i pro méně aktivní populaci.

Úplné řešení pro méně aktivní pacienty s amputací ve stehně

U mnoha lidí s amputovanou končetinou může mít věk a chatrné zdraví významný dopad na jejich mobilitu a sebedůvěru. Používání protézy může být samo o sobě náročné, takže pocit jistoty a pohodlí je již od začátku klíčový, pokud si má uživatel uchovat určitou úroveň nezávislosti, byť by byla malá.

Společnost Össur nabízí široký sortiment řešení pro lidi s amputací ve stehně, kteří tráví většinu času doma nebo poblíž domova. Jsou určena pro chůzi konstantní rychlostí s chodítkem nebo bez něj, nebo pro jednoduchý přesun z postele například do křesla nebo do koupelny. Tato řešení byla pečlivě navržena tak, aby zajistila ideální bezpečnost, pohodlí a mobilitu, a to díky zavedení různých funkcí pro různé schopnosti a přání málo aktivních pacientů.

Dosažení správné rovnováhy může znamenat větší nezávislost a větší rychlost, při které má pacient větší jistotu při chůzi.

BEZPEČNOST
Zabezpečení proti případnému zakopnutí a pádům



POHODLÍ
Ochrana protilehlé končetiny a pahýlu.



MOBILITA
Zlepšení stability a větší jistota





POTŘEBY

- Stabilita ve stoji
- Ochrana pahýlu a druhé končetiny
- Pohyblivost

ZDRAVOTNÍ INDIKACE

- Větší míra jistoty
- Nižší riziko pádu/zranění
- Ochrana pokožky a kloubů
- Minimalizace bolesti

FUNKČNÍ VÝSLEDKY

- Bezpečné přemístění
- Vyměkčení pahýlu a absorpce rázů
- Možnost věnovat se většímu počtu činností



Uživatel, který se přesouvá na krátké vzdálenosti

Nejméně aktivní pacienti po amputaci ve stehně, kteří se přesouvají pouze na krátké vzdálenosti například mezi postelí, křeslem a koupelnou.

Transfemorální lůžko se zámkem Iceross® (Locking)

Iceross Transfemoral Locking je první silikonové lůžko pro zajištění maximální stability a ovládní určené výhradně pro pacienty s amputací ve stehně pro větší jistotu a pohodu.

Doporučeno ve spojení s produkty řady Icelock® 600

Koleno se zámkem

Jednoduchý, spolehlivý a lehký kloub určený pro použití při rehabilitaci a jako trvalé řešení pro pacienty s amputací ve stehně, kteří mají velmi omezenou možnost pohybu.

- Manuální zámek zajišťuje jistotu a stabilitu
- maximální hmotnost až do 125 kg
- Snadné připevnění uvolňovacího lanka

Balance™ Knee Locking

Speciálně navržený produkt s odstranitelným manuálním zámkem, který dodává méně aktivním uživatelům větší jistotu; toto snadno nastavitelné čtyřosé geometrické koleno zajišťuje, že u protězy je správně vyvážena stabilita s individuální dynamikou chůze.

- Snímatelný manuální zámek
- Snadno nastavitelné (externě) pro optimalizaci požadované funkční rovnováhy
- Zkrácení střední fáze švihu zabraňuje nadzvedávání kyčle
- Snadno se kosmeticky zakryje a je snadné si kleknout
- Bezúdržbová konstrukce

Flex-Foot® Balance™

Toto multiaxiální chodidlo zajišťuje komfort a stabilitu díky osvědčené funkci systému Flex-Foot a bylo určeno konkrétně pro uživatele, kteří jsou schopni každodenních pochůzek a mohou vykonávat domácí práce.

- Dobré přizpůsobení se povrchu i při nerovnostech
- Přirozená chůze v důsledku multiaxiálního pohybu a plné délky skeletu
- Větší pohodlí a úleva pro uživatele s cévními komplikacemi
- Vlastnosti Flex-Foot pro špičkovou funkčnost

Transfemorální lůžko Iceross®



Icelock 600 Series

Balance™ Knee Locking
Koleno se zámkem



Flex-Foot® Balance™





POTŘEBY

- Stabilita ve stoji
- Ochrana páhýlu a druhé končetiny
- Pohyblivost

ZDRAVOTNÍ INDIKACE

- Větší míra jistoty
- Nižší riziko pádu/zranění
- Ochrana pokožky a kloubů
- Minimalizace bolesti

FUNKČNÍ VÝSLEDKY

- Bezpečné přemístění
- Vyměkčení páhýlu a absorpce rázů
- Možnost věnovat se většímu počtu činností
- Kontrolovaná plantární flexe



Domácí chodítko

Málo aktivní pacienti s amputací ve stehně, kteří obvykle chodí jednou rychlostí a pouze doma, často s pomocí chodítka.

Transfemorální lůžko se zámekem

Iceross® (Locking)

První silikonové lůžko Iceross Transfemoral Locking je určeno pro zajištění maximální stability a ovládání výhradně pro pacienty s amputací ve stehně pro větší jistotu a volnost pohybu.

Doporučeno ve spojení s produkty řady Icelock® 600

Iceross® Transfemoral Seal-In®

Silikonové lůžko Iceross Transfemoral Seal-In nabízí jedinečnou bezpečnost a volnost pohybu pro málo až extrémně aktivní pacienty s amputací ve stehně. Nyní je opatřena novým textilním potahem, který zlepšuje přilnavost o 25 %, je extrémně trvanlivý, umožňuje radiální natahování a zajišťuje pohodlnou elasticitu.

Doporučeno ve spojení s ventily řady Icelock® 500

Balance™ Knee

Speciálně navržený produkt, který dodává méně aktivním uživatelům větší jistotu; toto snadno nastavitelné čtyřosé geometrické koleno zajišťuje, že u protézy je správně vyvážena stabilita s individuální dynamikou chůze.

- Snadno nastavitelné (externě) pro optimalizaci požadované funkční rovnováhy
- Zkrácení střední fáze švihu zabraňuje nadzvedávání kyčle
- Snadno se kosmeticky zakryje a je snadné si kleknout
- Bezúdržbová konstrukce

Balance™ Foot J

Balance Foot J zajišťuje kombinaci stability a plynulejšího, přirozenějšího pohybu pro pacienty s nedávnou amputací a pro ty, kteří chodí pomalu. Napodobuje pohyb lidské nohy a zajišťuje vynikající stabilitu, podporu a energický pohyb vpřed.

- Lehké chodidlo s vlastnostmi Flex-Foot
- Vyměkčená pata zajišťuje stabilitu a větší pohodlí při došlápnutí
- Jedinečná funkce EVO přispívá k plynulému a snadnému přenesení váhy
- Palec z karbonového kompozitního materiálu zajišťuje dostatečné množství energie.

Iceross Transfemoral Locking
Iceross Seal-In® X5



Icelock 600 Series

Icelock 500 Series



Balance™ Knee



Balance™ Foot J





POTŘEBY

- Stabilita ve stoji
- Ochrana páhýlu a druhé končetiny
- Pohyblivost

ZDRAVOTNÍ INDIKACE

- Větší míra jistoty
- Nižší riziko pádu/zranění
- Ochrana pokožky a kloubů
- Minimalizace bolesti
- Úspora energie

FUNKČNÍ VÝSLEDKY

- Stabilita
- Vyměkčení páhýlu a absorpce rázů
- Plynulý odval
- Symetrický model chůze
- Možnost věnovat se většímu počtu činností
- Normální délka kroku
- Snížená spotřeba energie



Pro domácí a venkovní chůzi

Málo aktivní pacienti s transfemorální amputací, kteří obvykle chodí stejnou rychlostí ať doma nebo venku, obvykle bez chodítka.

Iceross Seal-In® X5

Tento velmi účinný bezmanžetový podtlakový systém kombinuje optimální vyměkčení s účinnou stabilizací měkkých tkání. Nabízí větší volnost pohybu, lepší pohodlí a jednodušší nasazování - stačí pouze nasadit lůžko a jít.

Doporučeno ve spojení s jednocestnými ventily řady Icelock® 500

Iceross® Transfemoral Seal-In®

Silikonové lůžko Iceross Transfemoral Seal-In nabízí jedinečnou bezpečnost a volnost pohybu pro málo až extrémně aktivní pacienty s amputací ve stehně. Nyní je opatřena novým textilním potahem, který zlepšuje přilnavost o 25 %, je extrémně trvanlivý, umožňuje radiální roztažení a zajišťuje pohodlnou elasticitu.

Doporučeno ve spojení s jednocestnými ventily řady Icelock® 500

Pokud systém Seal-In není vhodný (například když je pahýl příliš krátký), doporučujeme použít silikonové lůžko Iceross Transfemoral Locking.

Doporučeno ve spojení s produkty řady Icelock® 600

Total Knee® 1900

Total Knee je standardní produkt v oblasti polycentrických kolen, který zaručuje stabilitu stoje, přirozenou chůzi a jistotu při švihů. Je pevný, trvanlivý, nabízí vynikající stabilitu během přenosu zátěže a kontrolovanou stabilitu během švihové fáze.

- Geometrický systém uzamykání se uvolní až tehdy, když se váha přenesla na špičku
- Zkrácení během středu švihové fáze zakomponovaným tlumičem rázu
- Nastavitelné ovládání fáze švihů
- Nastavitelná flexe při stožení a podpora extenze

Flex-Foot® Assure™

Zavedená technologie Flex-Foot umožňuje plynulé přenesení váhy, stabilní chůzi a má výhody plynoucí z dynamické odezvy, což ocení zvláště ti, kdo mají problémy s cévami a diabetem.

- Aktivní pata a plná délka skeletu spolupracují při ochraně zdravé končetiny.
- Lepší absorpce rázů
- Plná délka skeletu zajišťuje plynulejší přenesení váhy
- Výjimečná pružnost snižuje nutnost nuceného dopředného pohybu trupu a pomáhá vyrovnat délku kroku
- Jedinečná funkce EVO přispívá k plynulému a snadnému přenesení váhy

Iceross Seal-In® X5



Icelock 500 Series

Total Knee® 1900



Flex-Foot® Assure™



Získejte správnou rovnováhu

Kompletní řešení pro méně aktivní pacienty s amputací ve stehně

OBJEDNACÍ INFORMACE ICEROSS®

DÍL Č.	PROFIL	METODA ZAVĚŠENÍ	MATRICE
SILIKONOVÉ LŮŽKO ICEROSS TRANSFEMORAL LOCKING			
I-7032XX	Standardní 2 mm	Locking	Plná délka
I-7132XX	Kónický 3 mm	Locking	Plná délka
SILIKONOVÝ NÁVLEK ICEROSS SEAL-IN X5 TRANSFEMORAL			
I-7532XX	Standardní 3 mm	Seal-In	Plná délka
I-7632XX	Kónický 3 mm	Seal-In	Plná délka
SILIKONOVÝ NÁVLEK ICEROSS TRANSFEMORAL SEAL-IN			
I-7532XX	Standardní 3 mm	Seal-In	Plná délka
I-7632XX	Kónický 3 mm	Seal-In	Plná délka

OBJEDNACÍ INFORMACE KOLENE

SADA LOCKING KNEE	
LKN12500	Locking Knee – Koleno se zámkem
LKN12590	Sada táhla zámku

SADA BALANCE KNEE	
BKN12511	Balance Knee Locking* - Balance Knee se zámkem
BKN12500	Balance Knee*
BKN12501	Balance Knee Strong Extension Assist* - Silnější podpora extenze

* Koleno se dodává spolu s ochranným krytem

SADY TOTAL KNEE 1900*	
1900	Total Knee 1900
1900-KE	Polymer Friction Knee Prong Adapter – spojení s adaptérem pro laminování
1900-OS	Polymer Friction Knee Pyramid Adapter – spojení s pyramidovým adaptérem

* Koleno se dodává spolu s namontovaným červeným dorazem.

OBJEDNACÍ INFORMACE FLEX-FOOT®

FLEX-FOOT BALANCE	
FBP0xyz	Chodidlo s pyramidou a obalem chodidla
FCT0yyz*	Obal chodidla

* u hnědého obalu chodidla přidat k č. dílu „BR“.
x: kategorie (1-5) yy: velikost (21-28) z: strana (L/P)

BALANCE FOOT J	
JBPExyz	Balance Foot J s pyramidovým adaptérem a obalem chodidla
FCL0yyz*	Obal chodidla

* (U hnědého obalu chodidla přidat k č. dílu „BR“.)
x: kategorie (1-5) yy: velikost (22-30) z: strana (L/P).

FLEX-FOOT ASSURE	
FAPExyz*	Chodidlo s pyramidou
FAXExyz*	Bez adaptéru

* U hnědého obalu chodidla přidat k č. dílu „BR“.
x: kategorie (1-5) yy: velikost (19-30) z: strana (L/P)



DISTRIBUTOR | ING corporation, s.r.o.
Dr. Jánského 3238
Frýdek-Místek
738 01
Česká republika

TEL. | +420 558 663 215, 205
FAX | +420 558 663 217, 207

E-MAIL | info@ossur.cz
WEB | www.ossur.cz

PODÍVEJTE SE NA ÖSSUR NA



Life Without Limitations®