

## SOLUTIONS JUNIOR

---

Une solution pour  
chaque enfant





## LES ENFANTS SONT PLUS ACTIFS QUE LES ADULTES

Ce n'est pas un secret : les enfants bougent plus que les adultes. Ils ont davantage d'énergie, jouent plus et courent pour se déplacer alors que la plupart des adultes marchent.

Voilà pourquoi nous avons enrichi notre gamme pédiatrique de non pas une, ni deux, mais trois nouvelles solutions de pieds dynamiques, et notamment d'un Vari-Flex Junior, d'un pied de course Cheetah® Junior pour les enfants présentant des moignons résiduels plus longs et d'un pied hybride marche/course, le Cheetah® Xplore Junior.

Les enfants amputés aiment comme les autres jouer avec leurs amis, participer à des compétitions sportives ou promener le chien de la famille. Össur est là pour les accompagner dans cette voie.



### Sélection de solutions Junior



Flex-Foot® Junior



Vari-Flex® Junior



Cheetah® Xplore  
Junior



Flex-Run™ Junior



Cheetah® Junior



Iceross® Junior  
Dermo® et Stabulo



Total Knee®  
1100



## FLEX-FOOT® JUNIOR

Du ressort à chaque pas, avec le pied Flex-Foot en fibre de carbone, spécialement conçu pour les enfants.

Idéal pour les plus jeunes, le Flex-Foot Junior offre cette restitution d'énergie vraiment essentielle. Le talon actif Carbon-X® stocke l'énergie et absorbe les chocs, tandis que la semelle de longueur intégrale favorise la stabilité et une longueur de pas plus régulière.

Le module de pied de profil bas à stockage d'énergie comporte une semelle à orteils séparés et une pyramide mâle intégrée. La forme de l'adaptateur pyramidal contribue au raidissement progressif du pied.

Le revêtement en fibre de carbone a été spécifiquement conçu pour offrir le soutien et la souplesse nécessaires pour accompagner tous les mouvements des enfants. La déflexion de la partie antérieure du pied, du milieu de la phase d'appui à la fin du pas postérieur, est proportionnelle au poids de l'enfant, et est conçue pour supporter les niveaux d'impact élevés générés par les enfants.



SEMELLE DE LONGUEUR INTÉGRALE



RÉPONSE PROPORTIONNELLE



TALON ACTIF CARBON-X®



ORTEILS SÉPARÉS



## VARI-FLEX® JUNIOR

Combinant à la fois confort et dynamique, le pied Vari-Flex Junior est unique en son genre. Il a été spécialement conçu pour les enfants ayant besoin d'une plus importante restitution d'énergie.

Le pied Vari-Flex Junior est léger, facile à assembler et à recouvrir esthétiquement grâce à son profil élancé. Il procure à l'utilisateur un niveau de confiance et de sécurité inégalé. Ce pied, qui favorise une démarche naturelle tout en réduisant la fatigue et les contraintes exercées sur le bas du dos et le côté sain, est idéal quelle que soit l'activité.



SEMELLE DE LONGUEUR INTÉGRALE



RÉPONSE PROPORTIONNELLE



PROGRESSION TIBIALE ACTIVE



TALON ACTIF CARBON-X®



ORTEILS SÉPARÉS





## CHEETAH® XPLORE JUNIOR

Un pied hybride en fibre de carbone fabriqué sur mesure et conçu à la fois pour un port quotidien et pour la pratique sportive.

Cheetah Xplore Junior est la solution idéale pour les enfants ayant besoin d'une même prothèse pour la marche et pour la course. Cheetah Xplore associe la lame de sprint Cheetah aux performances éprouvées, à un talon adapté pour la phase d'appui et la marche au quotidien.



SEMELLE DE LONGUEUR INTÉGRALE



RÉPONSE PROPORTIONNELLE



PROGRESSION TIBIALE ACTIVE



TALON ACTIF CARBON-X®



## FLEX-RUN™ JUNIOR

Le Flex-Run Junior est une solution conçue sur mesure pour les enfants. Son adaptabilité verticale et sa restitution d'énergie efficace deviendront vite indispensables aux enfants très actifs.

Conçu pour être le pied de course le plus flexible, le Flex-Run Junior offre une excellente qualité d'amortissement, parfaite pour les utilisateurs fémoraux et tibiaux.



RÉPONSE PROPORTIONNELLE



PROGRESSION TIBIALE ACTIVE



## CHEETAH® JUNIOR

Pied en fibre de carbone de haute performance réalisé sur mesure, principalement pour les activités sportives.

C'est le pied de course et de loisirs optimal pour les amputés tibiaux et fémoraux. Ce pied, qui a fait ses preuves, s'attache à l'arrière de l'emboîture, ce qui lui donne souplesse et solidité, qualités indispensables pour les enfants désireux de pratiquer un sport.



RÉPONSE PROPORTIONNELLE




PROGRESSION TIBIALE ACTIVE

## ICEROSS® JUNIOR

Les manchons en silicone Iceross sont largement reconnus comme étant un système supérieur de suspension. Les manchons Iceross stabilisent les tissus mous, limitent l'effet piston, contribuent à améliorer la circulation et apportent un plus grand confort.

Le manchon de verrouillage Iceross Stabilo® Junior avec technologie Wave est spécialement conçu pour apporter confort et stabilité aux enfants pratiquant des activités à impact élevé. Le soin actif de la peau qu'il contient a un effet apaisant, bienvenu dans une journée de jeux et d'activités. Idéal pour les enfants nécessitant une stabilisation des tissus mous.

Le manchon de verrouillage Iceross Dermo® Junior avec technologie Wave apporte un confort et une protection contre les chocs remarquables aux enfants à la peau sensible et pratiquant des activités à impact modéré. Les ingrédients du soin actif de la peau sont incorporés au matériau à base de silicone.

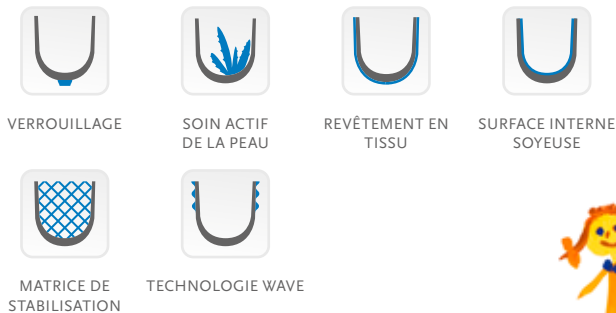

## SÉRIE ICELOCK® 700

Un verrou à sangle crantée, robuste et léger, prévu pour être utilisé avec les manchons Iceross Junior.

La série Icelock 700 comprend un verrou à sangle crantée, des adaptateurs de verrou et des outils de fabrication spécifiquement conçus pour s'adapter aux moignons de petite taille. Réduit de 30 % par rapport à ceux de la série Icelock 600, ce verrou est idéal pour les membres inférieurs des enfants.

Il est à la fois extrêmement léger et très solide. Les outils de fabrication réutilisables en acier inoxydable ont été pensés pour simplifier au maximum le processus de fabrication. Le verrou peut être retiré depuis l'intérieur de l'emboîture, afin d'en faciliter l'entretien.

## TOTAL KNEE® JUNIOR

Le genou Total Knee Junior bénéficie de la technologie primée du Total Knee. Des roulements à aiguilles de haute qualité permettent d'en accroître la longévité.

Les journées en plein air ne constituent plus un problème, grâce à ce genou en aluminium léger et extrêmement solide. Les 395 g du Total Knee Junior concentrent toute la technologie de la prothèse primée Total Knee dans seulement les deux tiers de sa taille d'origine. La résistance d'extension souple pour un mouvement rapide, le contrôle de flexion limitant l'élevation du talon et la fonction de flexion d'appui réglable offrent un contrôle optimal et une excellente absorption des chocs. C'est pour tous la possibilité de se déplacer en toute liberté, comme n'importe quel autre enfant.

Les enfants peuvent décorer et personnaliser leurs manchons. Chaque manchon Junior est livré avec des marqueurs indélébiles dans quatre couleurs différentes.



## ADAPTATEURS JUNIOR

Pour les emboîtures, genoux et pieds, nous réalisons des adaptateurs légers et robustes qui vous aideront chaque fois à monter la solution la mieux adaptée. Les adaptateurs sont garantis pour s'adapter sur l'ensemble des produits Össur Junior.





# Solutions Össur junior - Informations de commande

## FLEX-FOOT® JUNIOR

Réf.	Désignation
JRPOXXYZ	Kit Flex-Foot Junior avec pyramide mâle

Poids (kg)	15-24	25-34	35-45
Catégorie X	1	2	3

YY : Pointure (16 - 21) Z : Côté (L=Gauche/R=Droit)

REMARQUE : Les catégories ci-dessus s'appliquent uniquement au Flex-Foot Junior. Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans chaque catégorie.

## VARI-FLEX® JUNIOR

Réf.	Désignation
VJBOXXYZ	Kit Vari-Flex Junior avec pyramide mâle

Poids (kg)	15-24	25-34	35-45	46-55
Catégorie X	1	2	3	4

YY : Pointure (16 - 24) Z : Côté (L=Gauche/R=Droit)

REMARQUE : Les catégories ci-dessus s'appliquent uniquement au Vari-Flex Junior. Toutes les pointures ne sont pas disponibles dans chaque catégorie.

## REVÊTEMENTS DE PIED À UTILISER AVEC FLEX-FOOT® JUNIOR ET VARI-FLEX® JUNIOR\*

Réf.	Pointure (XX)
JRX50XXZ	16-21
FCT0XXZ	22-24

Z : Côté (L=Gauche/R=Droit) \*Pour obtenir un revêtement marron, ajouter le suffixe "BR" à la référence

## CHEETAH® XPLORE JUNIOR

Réf.	Désignation
CHX0Y	Kit Cheetah Xplore Junior

Poids (kg)	15-24	25-34	35-45	46-55
Catégorie Y	1	2	3	4

## FLEX-RUN™ JUNIOR

Réf.	Désignation
FSX007X	Kit Flex-Run

Poids (kg)	15-24	25-34	35-45	46-56	57-67	68-84
Catégorie X	1	2	3	4	5	6

## CHEETAH® JUNIOR

Réf.	Désignation
CJX0Y	Kit Cheetah Junior

Poids (kg)	15-24	25-34	35-45	46-55
Catégorie Y	1	2	3	4

## MANCHON ICEROSS® JUNIOR LINER AVEC WAVE (PROFIL DE 3 MM)

Réf.	Profil	Méthode de suspension	Matériau	Matrice
I-8302XX	3mm	Wave Locking (avec attache distale)	Derma - DermoGel	10cm
I-8301XX	3mm	Wave Locking (avec attache distale)	Stabilo - DermoSil	10cm

XX - Taille 12, 14, 16, 18

Remarque : Les tailles 12 et 14 utilisent un filetage M6.

Les tailles 16 et 18 ont un plongeur distal interchangeable pour l'utilisation avec un filetage M6 ou M8.

## TOTAL KNEE®

Réf.	Désignation
1100	Total Knee Junior
1100-OS	Total Knee Junior pour amputation transfémorale avec pyramide mâle
1100-KE	Total Knee Junior pour désarticulation avec adaptateur d'emboîture à 4 branches



WWW.OSSUR.FR

Össur Europe BV  
Ekkersrijt 4106-4114  
PO Box 120  
5690 AC Son en Breugel  
Pays-Bas

TÉL. +800 3539 3668 (NUMÉRO VERT)  
+31 (0) 499 462 840

FAX +800 3539 3299  
+31 (0) 499 462 841  
orders.france@ossur.com

