

## Rebound<sup>®</sup> DUAL


Schutz und Unterstützung ohne  
Bewegungseinschränkungen



# REBOUND® DUAL

HMV-NR.: 23.04.03.3XXX

Die leichte, wenig aufragende Orthese unterstützt das Knie zuverlässig bei Band-Instabilitäten. Die Knie-Orthese ist für Sportarten mit geringer und hoher Belastung geeignet und bietet einen hohen Schutz ohne Einschränkung der normalen Bewegung

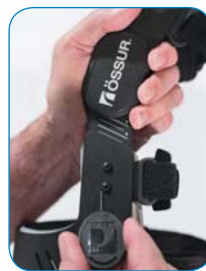

## Verlässliche Stabilität

Das robuste, polyzentrische Scharnier mit flachem Profil sorgt für optimale Stabilität. Für zusätzlichen Halt umfasst der Gurt das Schienbein.

## Individuelle Anpassung

Der obere Rahmen kann von 31,75 bis 35,56 cm Länge an die individuellen Anforderungen (Ausmaß der Stabilisierung und Körpergröße) angepasst werden, so dass die Orthese perfekt sitzt. Darüber hinaus gibt es eine Varus-/Valgus-Einstellung.

## Hoher Komfort

Der leichte Aluminiumrahmen macht die Orthese besonders komfortabel. Die Doeskin-Oberschenkel-Liner und die unkomplizierten Gurte fördern die Patienten-Compliance. Abnehmbare Gurte und Liner vereinfachen die Pflege.





### Fester Sitz

Das atmungsaktive ActiveGrip™-Wadenpolster schützt an die individuelle Anforderungen (Ausmaß der Stabilisierung und Körpergröße) angepasst werden, bleibt die Orthese fest sitzen, so dass sich auch aktive Sportler auf einen sicheren Halt verlassen können.

### Einstellbarer Rahmen = geringere Lagerbestände

- Die Standard-Version (schwarz-silber) gibt es in 7 Größen (rechts und links).
- Optional ist eine Custom-Version erhältlich.

### INDIKATIONEN

- ACL, MCL, LCL, PCL oder kombinierte Instabilitäten
- Weitere Verletzungen des Kniegelenkes, die von einer Stabilisierung profitieren

# REBOUND® DUAL BESTELL-INFORMATIONEN

## REBOUND DUAL

Größe	M / L Maß	Umfang	Links	Rechts
XS	7,6 - 8,9 cm	38,1 - 41,9 cm	B-242610001	B-242510001
S	8,9 - 10,2 cm	41,9 - 47 cm	B-242610002	B-242510002
M	10,2 - 11,4 cm	47 - 52,1 cm	B-242610003	B-242510003
L	12,7 - 14 cm	57,2 - 62,2 cm	B-242610004	B-242510004
XL	14 - 15,2 cm	62,2 - 69,9 cm	B-242610005	B-242510005
XXL	15,2 - 16,5 cm	69,9 - 76 cm	B-242610006	B-242510006
XXXL	15,2 - 16,5 cm	69,9 - 76 cm	B-242610007	B-242510007

## REBOUND DUAL CUSTOM

Links	Rechts
B-155610001	B-155510001

1. M/L an der Gelenkbreite in einer Standard-Belastungsposition  
 2. Oberschenkel-Umfang, 15 cm über der Patella-Mitte

## CUSTOM-VERSION IN 25 FARBVARIANTEN

Individuelle Optik durch die Kombination von 5 Rahmen-Farben und 5 Polster-Farben

### 5 RAHMEN-FARBEN:

- Schwarz (Standard)
- Blau
- Silber
- Weiß
- Rot

### 5 POLSTER-FARBEN

- Silber (Standard)
- Blau
- Gelb
- Lila
- Schwarz



## SmartMeasure™

Wir bieten zur Vermessung der Custom Knie-Orthesen ein digitales Messsystem basierend auf der iOS Software an. Dies ist die intuitivste, effizienteste und präziseste Methode, die massgefertigten Össur-Orthesen zu vermessen. Das System führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess: Produktauswahl, Messung, Bestellung.



Apple, the Apple logo, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

P-520160DE-DE

Össur Deutschland GmbH  
 Augustinusstraße 11A  
 50226 Frechen  
 Deutschland

TEL 02234 6039 102  
 FAX 02234 6039 101  
 info-deutschland@ossur.com

WWW.OSSUR.DE

Össur Schweiz AG  
 Hans Huber-Strasse 38  
 4500 Solothurn  
 Schweiz

TEL 0800 344 000  
 FAX 0800 344 001  
 info-schweiz@ossur.com

WWW.OSSUR.CH

Össur Österreich GmbH  
 Gauer mann gasse 2  
 1010 Wien  
 Österreich

TEL 00800 3539 3668  
 FAX 00800 3539 3299  
 info-osterreich@ossur.com

WWW.OSSUR.AT

