

## PRO-FLEX® XC TORSION



Pro-Flex XC è stato sviluppato per gli utenti attivi a cui piace fare trekking e jogging, così come passeggiare su zone piane.

Pro-Flex XC Torsion combina le caratteristiche di Pro-Flex XC quali ritorno energetico e rollover fluido, con ottima ammortizzazione e capacità rotazionali. La lamina in carbonio copre tutta la lunghezza del piede protesico e risulta essere più ampia rispetto ai piedi tradizionali.

Il piede è ideale per gli utenti attivi che vogliono usare un unico piede sia per la loro vita quotidiana, che per attività ad alto impatto.

Con meno carico e più dinamicità gli utenti amputati possono godere di maggior comfort in molte attività. La cover piede anatomica, leggera e dal design ricercato include una suola antiscivolo che permette di avere stabilità a piedi nudi su superfici bagnate o scivolose, ed un alluce separato per un'ampia gamma di scarpe, incluse le infradito.

Össur consiglia l'utilizzo di Pro-Flex XC Torsion unitamente al sistema di sospensione sottovuoto senza ginocchiera Unity. Questo aggiunge peso minimo, non altera l'altezza strutturale, e non interferisce con la dinamicità di Pro-Flex XC Torsion. Unity è progettato per fornire sospensione sicura in combinazione con la tecnologia Iceross Seal-In, stabilizzando le oscillazioni di volume e mantenendo la vestibilità dell'invasatura comoda per tutto il giorno.

UNITY  
COMPATIBLE



Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transtibilale e Transfemorale
Livello di attività:	Basso ad Alto
Limite peso:	147kg



RISPOSTA  
PROPORZIONALE



CARBON-X®



LEVA PLANTARE  
SU TUTTA LA  
LUNGHEZZA



PROGRESSIONE  
TIBIALE ATTIVA



TUBO VERTICALE  
AMMORTIZZANTE



ROTAZIONE/  
TORSIONE



LAMINA DIVISA



COSMETICO  
INFRADITO



WEATHERPROOF


Informazioni piede	
Categorie:	1-8
Misure:	22-30
Peso del piede: (Misura 27, cat 5)	1035g con cover piede e calza
Altezza: (Misura 27)	222mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatori:	Giunto piramidale maschio

Informazioni sul sistema Unity	
Depressione massima:	23inHg (-600mmHg)
Normale pressione di esercizio:	16-20 inHg
Peso aggiuntivo al sistema:	91g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

# PRO-FLEX® XC TORSION

## INFORMAZIONI ORDINI


### PER PIEDE COMPLETO

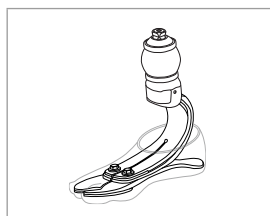

Al momento dell'ordine si prega di selezionare il kit modulo pompa Unity in base alle dimensioni del modulo piede: Unity verrà premontato sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per la guida alla scelta della categoria della cuffia ed i codici di prodotto si prega di consultare la pagina relativa ad Iceross Seal-In.

### PER PIEDE COMPLETO CON UNITY

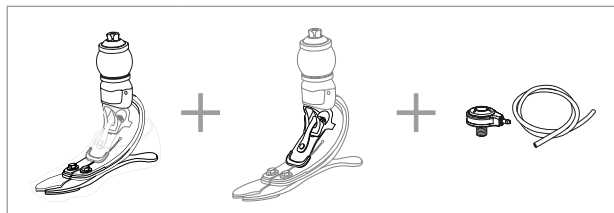


## GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
<b>Livello di attività basso</b>									
Misura 22-24	1	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A
Misura 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Misura 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8
<b>Livello di attività moderato</b>									
Misura 22-24	1	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A
Misura 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	N/A
Misura 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	N/A
<b>Livello di attività alto</b>									
Misura 22-24	2	3	4	5	6	N/A	N/A	N/A	N/A
Misura 25-27	2	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A
Misura 28-30	3	3	4	5	6	7	8	N/A	N/A

PIEDI ÖSSUR

# PRO-FLEX® XC TORSION

## INGOMBRO

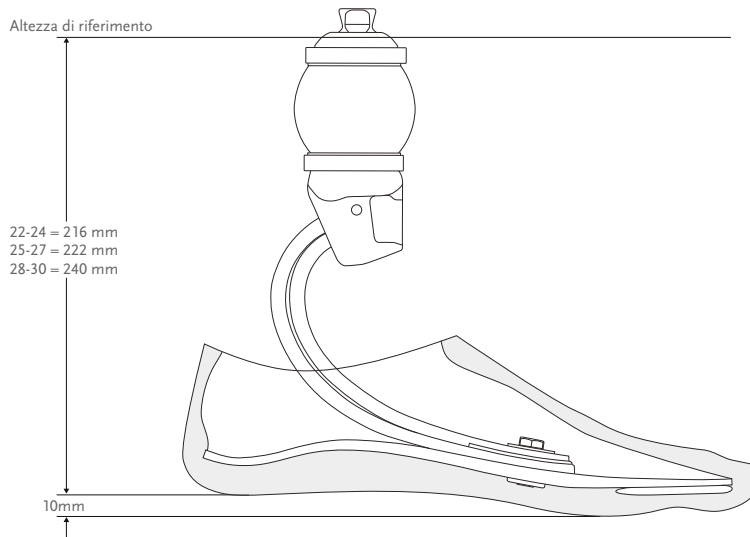


\*Nota: Pro-Flex XC Torsion con Unity ha la stessa altezza

## KITS

### PRO-FLEX XC TORSION CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO E KIT COVER PIEDE


COD. PROD.

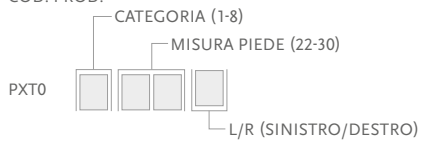

Include:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera\*

\*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

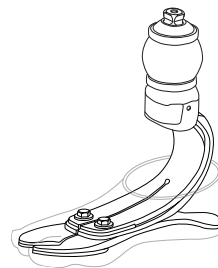


## PRO-FLEX® XC TORSION

### UNITY

#### KITS UNITY

Foto	Cod. prod.	Descrizione	Kit piede applicabili
1	UPC0024	Modulo pompa Unity PXC S22-24	Pro-Flex XC/ XC Torsion 22-24
1	UPC0027	Modulo pompa Unity PXC S25-27	Pro-Flex XC/ XC Torsion 25-27
1	UPC0030	Modulo pompa Unity PXC S28-30	Pro-Flex XC/ XC Torsion 28-30
2	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
4	UTF0006	Kit valvola Unity TF	Tutti
5	L-544611	Kit Icelock 544	Tutti

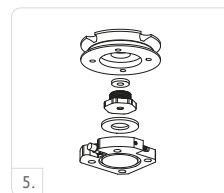


#### COMPONENTI DI RICAMBIO UNITY

Cod. prod.	Descrizione
UPC00021	Componenti Unity PXC S22-24
UPC00022	Componenti Unity PXC S25-27
UPC00023	Componenti Unity PXC S28-30

Include:


- Lama pompa
- Membrana
- Raccordo spinato
- Valvole unidirezionale
- Vite di montaggio
- Tubo
- Loctite
- Chiave esagonale

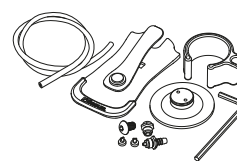

# PRO-FLEX® XC TORSION

## KIT PIEDI PER UNITY

### PRO-FLEX XC TORSION CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO

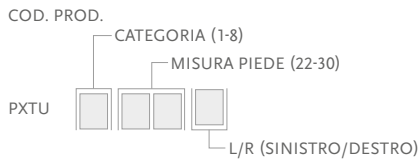


Include:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera\*

\*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

Nota: Unity arriverà premontato sul piede se ordinato con PXTU.

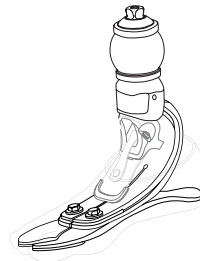

## RIVESTIMENTO COSMETICO

### KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE\*



Include:

- Cover piede\*
- Collegamento cover piede
- Calza Spectra nera

\*Nota: per ordinare la cover marrone, aggiungere "BR" al codice prodotto



### CALZA FLEX-FOOT SPECTRA NERA

Utilizzato per coprire il modulo piede in carbonio, per proteggerlo ed eliminare il rumore tra modulo piede e cover piede.

Cod. prod.	Descrizione	Misura
FCX63022	Calza Flex-Foot Spectra nera Small	22-25
FCX63025	Calza Flex-Foot Spectra nera Large	26-30
FCX63022-15	Calza Flex-Foot Spectra nera Small 15 calze	22-25
FCX63026-15	Calza Flex-Foot Spectra nera Large 15 calze	26-30

