

# CUFFIE BY ÖSSUR®



	TRANSTIBIALE											TRANSFEMORALE							JUNIOR						
	SEAL-IN				LOCKING							LOCKING / CUSHION		CUSHION			SEAL-IN			LOCKING				LOCKING	
PRODOTTO	ICEROSS SEAL-IN® X	ICEROSS SEAL-IN® V	ICEROSS SEAL-IN® X5	ICEROSS DERMO SEAL-IN®	ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING	ICEROSS DERMO® LOCKING	ICEROSS COMFORT® LOCKING	ICEROSS® ORIGINAL LOCKING	ICEROSS® SPORT LOCKING	SENSITIVE™ LOCKING	SOFT C™ LOCKING	PROTECT™ LOCKING/ CUSHION	RELAX™ LOCKING/ CUSHION	ICEROSS® SYNERGY™ CUSHION	ICEROSS DERMO® CUSHION	ICEROSS COMFORT® CUSHION	ICEROSS® ACTIVA WITH TIBIAGUARD™	ICEROSS SEAL-IN® X TF	ICEROSS SEAL-IN® X5 TF	ICEROSS SEAL-IN® TF	4SEAL CLASSIC™	ICEROSS® TF LOCKING	AKOS™	RELAX™ TF	ICEROSS® JUNIOR LOCKING
LIVELLO DI ATTIVITÀ																									
PROFILO	3mm e 6mm	3mm	3mm	3mm	3mm	3mm e 6mm* (Standard) 3mm (Conica)	3mm e 6mm*	2mm	3mm	3mm e 6mm	2mm	3mm	3mm e 6mm	3mm	3mm e 6mm	3mm e 6mm	6mm anteriore 2mm posteriore	3mm	3mm	3mm	2mm	2mm (Standard) 3mm (Conical)	2mm	2mm	3mm
LUNGHEZZA MATRICE	Senza matrice	Senza matrice	10-13cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	10cm	5+3 / 10+3	5+3 / 10+3	LOCKING: 5+3 / 10+3 CUSHION: Senza matrice	LOCKING: 5+3 / 10+3 CUSHION: Senza matrice	Senza matrice	Senza matrice	Senza matrice	Senza matrice	Senza matrice	Lunghezza intera	Lunghezza intera	Lunghezza intera	Lunghezza intera	Lunghezza intera	Lunghezza intera	10cm
SOSPENSIONE																									
<b>CARATTERISTICHE</b>																									
MATRICE STABILIZZANTE																									
RIVESTIMENTO IN TESSUTO																									
SKIN CARE ATTIVO																									
DOPPIO DUROMETRO																									
WAVE																									
MENTOLO																									
SUPERFICIE INTERNA SETIFICATA																									
TIBIAGUARD™																									
CONICA																									
UMBRELLAN																									
EASY-GLIDE																									
UNITY® COMPATIBILE																									
OPZIONI		Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)		Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Le cuffie Locking sono disponibili in 2 matrici	Le cuffie Locking sono disponibili in 2 matrici	Le cuffie Locking sono disponibili in 2 matrici	Le cuffie Locking sono disponibili in 2 matrici	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)	Disponibile anche nella versione standard (senza wave)										Disponibile con silicone Stabilo e Dermo
SOSPENSIONE CONSIGLIATA	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 600	Icelock 600	Icelock 600	Icelock 600	Icelock 600	Icelock 600	Icelock 600	Icelock 500 (cushion) & 600 (locking)	Icelock 500 (cushion) & 600 (locking)	Icelock 500 con Iceross Sleeve	Icelock 500 con Iceross Sleeve	Icelock 500 con Iceross Sleeve	Icelock 500 con Iceross Sleeve	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 500	Icelock 200	Icelock 200	Icelock 200	Icelock 700

**SEAL-IN X**  
L'anello mobile può essere posizionato nel modo più opportuno a seconda delle esigenze, ottenendo una sospensione sicura e comoda. Indossare una cuffia Seal-In non è mai stato così facile.

- Posizionamento individuale
- Facile da indossare e togliere
- Eccezionale controllo rotazionale



SEAL-IN X

**SEAL-IN X5**  
I cinque anelli della cuffia Iceross Seal-In X5 si conformano alla forma del moncone e alla parete interna dell'invasatura, fornendo una chiusura ermetica e un maggior comfort.

- Controllo rotazionale
- Riduzione del pistoning
- Sospensione senza ginocchiera



SEAL-IN X5

**SEAL-IN V**  
La membrana con lamelle integrate si adatta ai cambiamenti di volume consentendone le oscillazioni e le variazioni di forma del moncone. La cuffia Seal-In V fornisce una sospensione comoda ed affidabile.

- Compensa i cambi di volume
- Sospensione cushion senza ginocchiera
- Controllo rotazionale



SEAL-IN V

**SEAL-IN**  
La membrana HSM ad un anello ottimizza la sospensione ed il comfort, offrendo la massima praticità d'uso per l'utilizzo quotidiano.


- Sospensione transtibiale ipobarica senza ginocchiera
- Facile da indossare e togliere
- Controllo rotazionale migliorato



SEAL-IN


**4SEAL**  
Con una serie di 4 anelli ed una superficie esterna rivestita, la cuffia 4Seal offre una tenuta ermetica ed una migliore maneggevolezza.

- Sospensione senza ginocchiera
- Facile da indossare

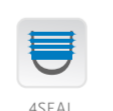

4SEAL

**LOCKING**  
Le cuffie con attacco offrono agli utenti una sospensione stabile, sicura e comoda. Possono essere utilizzate sia con sistemi di bloccaggio e con cordino.

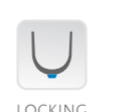

LOCKING

**CUSHION**  
Il cuscinetto distale, molto spesso e morbido, migliora il comfort dell'utente, protegge la parte distale più delicata e si adatta alle forme irregolari.



CUSHION

**MATRICE STABILIZZANTE**  
Un'esclusiva matrice integrata consente la distensione radiale e limitata la distensione verticale, incrementando la stabilità ed il comfort della pelle.



MATRICE STABILIZZANTE

**RIVESTIMENTO**  
Il rivestimento esterno fornisce massima vestibilità, resistenza e durabilità garantendo l'adattabilità alla circonferenza del moncone.



RIVESTIMENTO

**SKIN CARE ATTIVO**  
Vaseline® e Aloe Vera sono incorporate nel silicone Dermasil® silicone per dare sollievo ed aiutare a mantenere la pelle sana.



SKIN CARE ATTIVO

**DOPPIO DUROMETRO**  
Due durometri in silicone lavorano insieme: lo strato interno offre comfort e protezione alla pelle, mentre quello esterno offre ammortizzazione e stabilità.



DOPPIO DUROMETRO

**WAVE**  
Consiste nella presenza di una serie di zigrinature nella zona rotulea che consente una flessione del ginocchio facilitata, con minore costrizione in un'area sensibile quale la parte posteriore del ginocchio. Il risultato finale è più libertà di movimento, meno tensione al ginocchio ed una comodità mai raggiunta prima.



WAVE

**MENTOLO**  
Il mentolo è uno dei nostri ingredienti Skin Care attivo, dall'odore fresco e piacevole. Largamente utilizzato sin da tempi antichissimi per le sue proprietà rinfrescanti e calmanti sulla pelle, è utile per ridurre le lievi irritazioni cutanee.



MENTOLO

**SUPERFICIE INTERNA SETIFICATA**  
Superficie micro progettata per una conformazione alla pelle di livello ineguagliabile.



SUPERFICIE INTERNA SETIFICATA

**TIBIAGUARD**  
Un cuscinetto in morbido silicone con Wave integrato fornisce sospensione per la tibia anteriore, mentre uno strato di silicone più sottile nella parte posteriore migliora il controllo e la propriocezione. La combinazione dei due profili in silicone e il design Wave permettono un'ottima ammortizzazione e libertà di movimenti.




TIBIAGUARD

**CONICA**  
Questa caratteristica è progettata per fornire una vestibilità più comoda e personalizzata agli utenti con un moncone di forma conica. La forma conica è caratterizzata da una serie di ondulazioni verticali che riducono la pressione ed evitano che i bordi dell'estremità prossimale si arrotolino.



CONICA

**UMBRELLAN**  
Umbrellan è una schermatura contro le influenze elettromagnetiche.

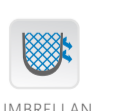

UMBRELLAN

**EASY GLIDE**  
Con la tecnologia del rivestimento Easy Glide, la cuffia offre agli utenti un elevato comfort di gestione. Non sono necessari lubrificanti per indossarla ed è facile da pulire.



EASY GLIDE