

BALANCE™ FOOT S

Baja actividad.
Alta tecnología.

Presentamos el nuevo **Balance Foot S**. Con la combinación de un suave amortiguador de talón, la exclusiva forma en C, una amplia quilla con punta separada y la unidad de torsión opcional, Balance Foot S proporciona la estabilidad, la seguridad y la confianza que exigen los usuarios de nivel K2, al tiempo que elevan su experiencia al siguiente nivel.

- ① **Forma en C**
Diseñada para mejorar el rango de movimiento del tobillo a fin de facilitar ponerse en pie desde la posición de sentado y una marcha más fluida y natural.
- ② **Amortiguador de talón**
El amortiguador de talón, formado por un estable compuesto de espuma almohadillada, se contrae y endurece gradualmente para facilitar una progresión plantar suave y el despegue del antepié.
- ③ **Quilla ancha**
Diseñada para velocidades de marcha de nivel lento a medio.
- ④ **Punta separada**
Proporciona estabilidad multiaxial en una gran variedad de superficies del día a día.
- ⑤ **Unidad de torsión opcional**
Ayuda a restaurar las capacidades de rotación perdidas, reducir las fuerzas de cizallamiento y absorber el impacto vertical.
- ⑥ **Vacío Unity sin necesidad de rodillera (opcional)**
Ayuda a reducir las fluctuaciones de volumen y las fuerzas de cizallamiento en el interior del encaje.



¡NUEVO!
Balance™ Foot S



¡NUEVO!
Balance™ Foot S Torsion

CARACTERÍSTICAS DEL BALANCE™ FOOT S Y BALANCE™ FOOT S TORSION



LONGITUD DE QUILLA COMPLETA



FLEXIBILIDAD MULTIAIXIAL AL TERRENO



QUILLA SEPARADA



DEDO PARA SANDALIA




RESISTENTE AL AGUA




RESISTENTE A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS cuando se combina con Unity

BALANCE FOOT S

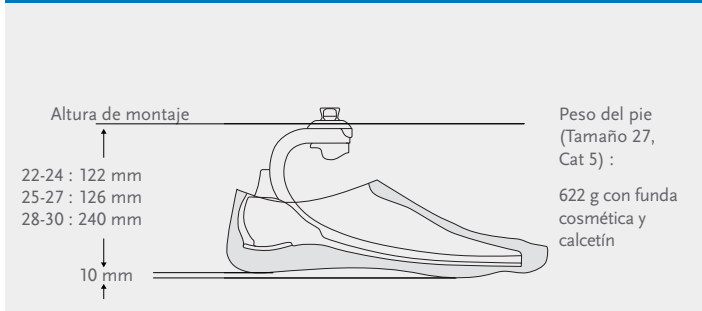

BALANCE FOOT S TORSION

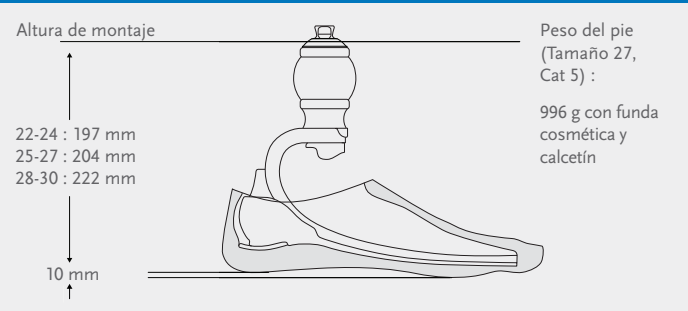

INDICACIONES

- Amputaciones transtibiales y transfemorales
- Nivel de impacto bajo
- Peso máximo del usuario: 147kg

OPCIONES

- Disponible en tamaños 22-30, categorías 1-8
- Unity disponible en tamaños 22-30

CALCETINES SPECTRA

N.º de ref.	Descripción	Tamaño	Color
FCX63022	Calcetín Spectra pequeño (S) 1 und.	22-25	Negro
FCX63022-15	Calcetín Spectra pequeño (S) 15 und.		
FCX63025	Calcetín Spectra grande (L) 1 und.	26-30	
FCX63026-15	Calcetín Spectra grande (L) 15 und.		

GUÍA DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147
Categoría de impacto bajo									
Tamaño 22-24	1	1	2	3	4	5	N/A	N/A	N/A
Tamaño 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Tamaño 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8

OPCIONES DE KIT

- BSPOXYZ Balance Foot S con funda cosmética
- BSPUXYZ Balance Foot S con Unity y funda cosmética
- BSTOXYZ Balance Foot S Torsion con funda cosmética
- BSTUXYZ Balance Foot S Torsion con Unity y funda cosmética

X: categoría 1-8, YY: tamaño del pie (22-30),

Z: L/R (izquierdo/derecho)

- Para funda cosmética de color marrón, agregue el sufijo "BR" al número de referencia

OPCIONES DE ACABADO COSMÉTICO

- FST0YYZ - FST - Kit de funda cosmética
YY: tamaño del pie (22-30), Z: lado L/R (izquierdo/derecho)
Incluye: kit de funda cosmética, fijación para la funda cosmética, calcetín Spectra negro
- Para funda cosmética de color marrón, agregue el sufijo "BR" al número de referencia

GARANTÍA

- Balance Foot S: 36 meses
- Balance Foot S Torsion: 36 meses
- Módulo de bomba Unity: 36 meses
- Válvula y membrana Unity: 12 meses